

RETREATY

再治疗锉
Endodontics kit

一种专门用于根管再治疗的系统,以微创的治疗理念而设计
遵循Styleitaliano牙髓病学原理

Power by:  STYLE ITALIANO




RETREATY

Endodontics kit

再治疗锉

如今,与首次根管治疗对比,根管再治疗越来越多,而且再治疗其病因更为复杂,将原根管充填物在进行去除的过程中不但耗费时间而且困难,这就是为什么我们决定根据 Styleitaliano 牙髓病学的原理,设计一种特定的治疗系统,以微创的方式进行再治疗。

Power by:  STYLE ITALIANO

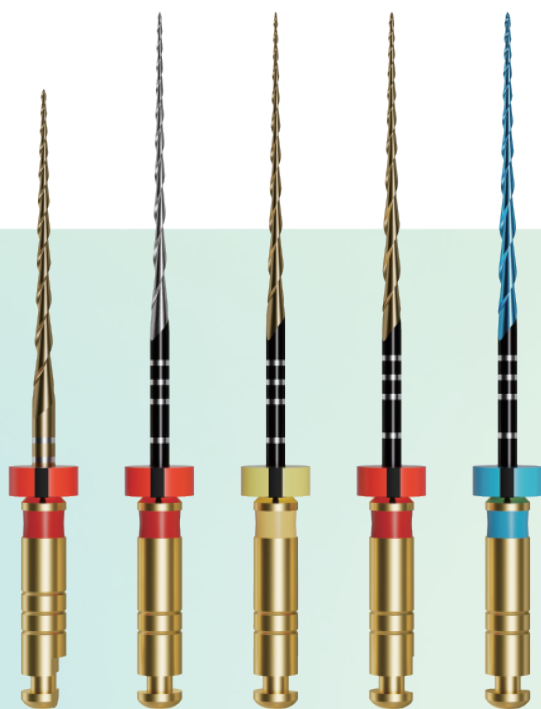

5支装型号

Bull	25/.07
SkinnY	25/.04
ShapY 1	20/.04
ShapY 2	25/.04
ShapY 3	30/.04

2支装型号

Bull	25/.07
SkinnY	25/.04

横截面 Cross section: 

转速 Speed range: 350~500RPM

扭矩 Torque: 1.5N·CM

两种模式可选择

A: 顺时针旋转

B: 逆时针旋转: 顺时针150°、逆时针30°



BULL

专门用于根管再治疗过程中去除牙胶充填材料。金色合金热处理、尖端切割角设计,较短的工作螺纹,短时间内无需任何溶剂可快速清除根管上部1/3的充填材料。



SKINN^Y

银色合金,弹性强切割锋利,有效去除根管的牙胶充填物,保留根管的形态,并在接近根尖末端创建一条可重复顺滑通道。



SHAP^Y 1

这是第一支成型锉,金色合金,柔韧但具有良好的切割能力,遵循根管原始结构。



SHAP^Y 2

再治疗中最流行的精修型号,金色合金,具有良好的柔韧性和抗折断性能。



SHAP^Y 3

蓝色合金,顶端形状扩大时,具有更高的灵活性。在不改变原始解剖结构的情况下实现最大程度的预备。